


COLCHÃO ANTI ESCARAS NINFA

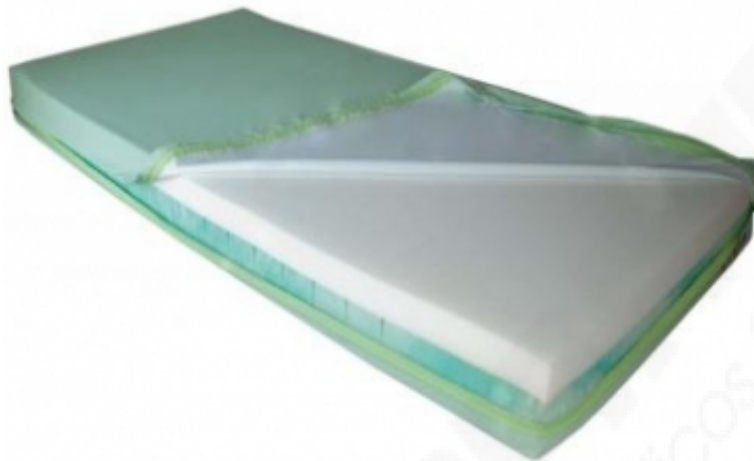

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Colchão desenvolvido para a prevenção e tratamento de escaras de decúbito;
- Colchão articulável e não reversível;
- A sua constituição permite minimizar a pressão exercida sobre a pele de forma a evitar a formação de escaras e acelerar a cicatrização das já existentes;
- O colchão Ninfa garante a postura ergonomicamente correcta do corpo durante o sono;
- Existem 2 versões de colchão Ninfa:
 - Ninfa 12: com 7cm de soyafoam na base de sustentação mais 5cm de Memory Foam na camada superficial;
 - Ninfa 14: com 9cm de soyafoam na base de sustentação mais 5cm de Memory Foam na camada superficial;
- Capa exterior: bielástica impermeável aos líquidos e permeável aos gases, transpirável que permite a respiração do interior, facilitando a higiene do colchão. Resistente ao fogo de acordo com a norma BS 7175 1989, Crib 5. O tecido pode ser lavado até uma temperatura de 95°C com detergentes neutros;
- Memory Foam: Espuma viscoelástica, extremamente moldável e aconchegante que permite uma comprovada redução da pressão exercida sobre a pele e os vasos sanguíneos, contribuindo para a melhor circulação sanguínea. A espuma viscoelástica adapta-se completamente ao formato do corpo, proporcionando uma sensação de leveza que se traduz num sono extremamente repousante;

- Soyafoam: Espuma utilizada como base de sustentação. É um Poliuretano inovador, porque se trata de uma espuma ecológica, feita com base na soja;
- Dimensões:
 - Ninfa 12: 190x90x12cm;
 - Ninfa 14: 190x90x14cm.
- Notas:
 - As referências mencionam colchões para camas de solteiro (até 190 x 90 cm);
 - Existe também para casal (até 200 x 150cm);
 - Fazem-se colchões por medidas (por orçamento).

Código	Descrição	Unidade de venda
30009014	COLCHÃO ANTI ESCARAS NINFA	CX. 1